

877PEYU

Однокомпонентна стерильна гнучка асферична гідрофобна акрилова інтраокулярна лінза (ІОЛ) з блокуванням УФ та фільтром синього світла. Торична оптика типу EDOF (з розширеною глибиною різкості). ІОЛ постачається попередньо завантаженою в інжектор.



 ЖОВТА ІОЛ

ДІАПАЗОНИ ОПТИЧНОЇ СИЛИ

Стандартні

+10,0 D → +30,0 D (з кроком 0,5 D)

Циліндричні

T2 1,0D T3 1,5D T4 2,25D T5 3,0D
T6 3,75D T7 4,5D T8 5,25D T9 6,0D*

МАТЕРІАЛ

Гідрофобний акрил з блокуванням УФ та фільтром синього світла

Індекс рефракції

1,47

Число АBBЕ

58

ДИЗАЙН

Оптичний діаметр
Загальний діаметр

6 мм

13 мм

Конструкція оптики

Асферична — абераційно-нейтральна біконвексна (+10,0 D → +30,0 D)

Номінальна А-константа

118,9

Кут контакту

124° кут контакту з капсульним мішком**

Зона EDOF

Центральні рефракційні зони, поєднані лінкінговими переходами

Конструкція гаптики

Вікончаті задні зведення типу С-петлі (C-loops) з ангуляцією 0°

Профілактика ПЗК

Гострий край 360°

Строк зберігання

2,5 роки від дати стерилізації

ВВЕДЕННЯ

Рекомендований розмір розрізу

2,2 мм

Сумісний інжектор

Попередньо завантажений інжектор одноразового використання POB-MA

КОНСТАНТИ

для оптичних та іммерсійних ультразвукових вимірювань

А-константа SRK/T

A = 118,9

Haigis

a0 = 1,32
a1 = 0,4
a2 = 0,1

Hoffer Q

pACD = 5,46

Holladay I

SF = 1,7

Barrett Universal II

LF = 1,83

Holladay II

ACD = 5,49
SF = 1,73

* Доступно вище +11,0 D SEQ.

** Вимірювання проведено в симуляторі стандартного капсульного мішка діаметром 10 мм.

877PETY

ПОПЕРЕДНЬО
ЗАВАНТАЖЕНА


3! | **elON**
FLEX | P O B - M A HYDROPHOBIC TORIC



EDOF

TORIC

PRELOADED

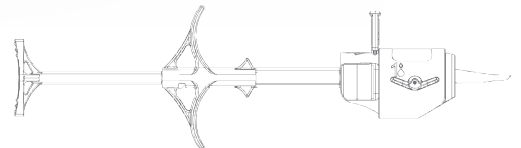

MEDICONTUR

Medicontur
Medical Engineering Ltd
export@medicontur.com
www.medicontur.com

Head Office
Herceghalmi út 1.
2072 Zsámbék
Hungary

International Office
Chemin du Champ-des-Filles 36
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland / Geneva

МЕДІКУС

Офіційний представник компанії Medicontur в Україні
ТОВ «Медична компанія «Медікус»
вул. Краківська, 22, Київ, Україна, 02094
тел.: +380 44 574 0571; факс: +380 44 574 0573
medicontur.com.ua

